

Wave

SELF CARE



WAVE
PRECISION

Manuel d'utilisation

**Veillez lire attentivement ce
manuel avant d'utiliser le
Wave Précision et conservez-le
pour une consultation future.**

Sommaire.

01. Présentation du produit

Les fonctions du Wave Précision	4
Indicateur sonore	4
Les différents modes	5
Les soins	5
Protocole d'application	5
Étapes à suivre	6

02. Mode Lift

Méthodes d'utilisation	7
Les effets bénéfiques.....	7

03. Mode Réparation

Méthodes d'utilisation	8
Les effets bénéfiques et précautions	8

04. Mode Boost

Méthodes d'utilisation	9
Les effets bénéfiques	9

05. Caractéristiques de l'appareil

Description du produit	10
Bouton central	10
Instructions de charge	10

06. Informations importantes


Consignes de sécurité	11
Contre indications et autres avertissements	12
Ingrédients à éviter	12
Entretien et nettoyage de l'appareil	13
Spécifications techniques	13
Garantie	14
Environnement	14

01. Présentation du produit

4 fonctions en 1 Pour un regard sublime


Les fonctions du Wave Précision

LED Rouges

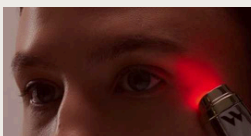

Les LED Rouges (630nm) améliorent l'élasticité de la peau grâce à son action photobiomodulatrice sur les cellules.

Micro-courants

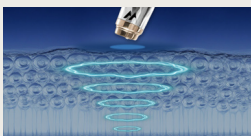

Les micro-courants permettent un lifting non invasif instantané par stimulation musculaire.

Radiofréquence



La radiofréquence (1MHz) permet de stimuler la production de collagène grâce à un chauffage contrôlé du derme (40-42°C) déclenchant une réponse naturelle de remodelage tissulaire.

Micro-vibrations



Les micro-vibrations permettent une relaxation musculaire grâce à ses micro-massages. De plus ils améliorent la circulation lymphatique permettant de réduire les poches et cernes.

Indicateur sonore

Pour un meilleur confort d'utilisation, un indicateur sonore toute les 5 secondes lorsque vous allumez le mode Réparation. Veuillez changer de zone d'application lorsque vous entendez le "bip".

Les différents modes

Veuillez prendre connaissance des modes avant toute utilisation



Mode Lift

Tonifie et draine



Mode Réparation

Raffermit et hydrate
en profondeur



Mode Boost

Augmente l'absorption
des soins



Les soins

Appliquez toujours un sérum ou un gel sur la zone à traiter avant d'utiliser l'appareil.

L'utilisation des sérums Wave est recommandée* lors des soins Wave Précision. Leur conductivité spécifique garantit une performance optimale de l'appareil.

*Certains ingrédients peuvent dégrader la sonde électronique de l'appareil. Vous trouverez cette liste à la page 12 de ce manuel.



Protocole d'application

Utilisez les trois modes dans l'ordre prévu, tout en respectant la fréquence d'usage de chacun.

1



2



3

Mode Lift

1 à 2 fois par jour
1 min. par zone
5 min. par séance

Mode Réparation

3 à 5 fois par semaine
1min. par zone
5min. par séance

Mode Boost

3 fois par semaine
jusqu'à 2 minutes par zone
5min. par séance

Étapes à suivre


- 1 Nettoyez votre peau, assurez-vous qu'elle soit bien propre. Puis appliquez le sérum Wave Selfcare.



- 2 Choisissez le mode qui vous convient selon votre besoin et suivez les instructions d'utilisation de l'appareil.



- 3 Vous pouvez garder le sérum ou le nettoyer avant de continuer votre routine skincare quotidienne.

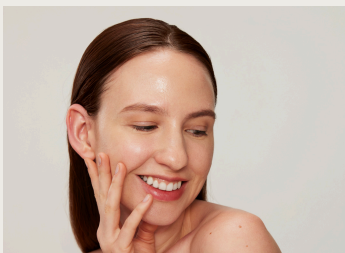

02. Mode Lift

Tonifie et draine

Mode Lift

LED Rouges / Micro-courants



Méthode d'utilisation

Appliquez toujours un sérum ou un gel sur la zone à traiter avant d'utiliser l'appareil.



Posez l'appareil côté sonde sur votre peau et faites le glisser pour redresser les muscles relâchés du coin de l'oeil.



Faites glisser l'appareil sur la zone à traiter. Gardez la sonde au contact de votre peau 1 à 2 secondes. Vous ressentirez des fourmillements.

Les effets bénéfiques


Le mode Lift permet de revitaliser les muscles faciaux et les nerfs moteurs ce qui rends la peau plus tonique. Il permet ainsi une meilleure circulation lymphatique réduisant les poches et les cernes.

03. Mode Réparation

Raffermit et hydrate

Mode Réparation

LED Rouges / Radiofréquence

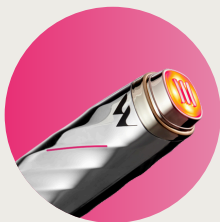

Méthode d'utilisation

Appliquez toujours un sérum ou un gel sur la zone à traiter avant d'utiliser l'appareil.



Faites glisser l'appareil en faisant des cercles. Changez de zone à chaque "bip" pour un meilleur confort d'utilisation.



Posez l'appareil côté sonde au contact de la zone à traiter laissez agir la sonde, puis à chaque "bip" changez de zone.

Les effets bénéfiques et précautions

Le mode Réparation stimule le derme en le réchauffant. Cela déclenche le processus de régénération de collagène et rends la peau plus lisse et raffermie.

Attention: Veuillez toujours garder la sonde de l'appareil en mouvement lorsque vous utilisez le mode Réparation. Changez de zone d'application à chaque fois que vous entendez le "bip" sonore.

04. Mode Boost

Améliore l'absorption


Mode Boost



LED Rouges / Micro-courants / Radiofréquence / Micro-vibrations

Méthode d'utilisation

Appliquez toujours un sérum ou un gel sur la zone à traiter avant d'utiliser l'appareil.

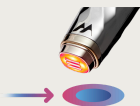

Faites glisser l'appareil sur la zone à traiter. Gardez la sonde au contact de votre peau 1 à 2 secondes. Vous ressentirez des fourmillements, et une légère chaleur.



Posez la sonde au contact des zones à traiter point par point. Vous ressentirez des fourmillements et une légère chaleur.


Les effets bénéfiques

Le mode Boost permet de préparer la peau pour une meilleure absorption des produits skincare. La succession de séquence de réchauffement, de fourmillement et de vibrations permet de détendre la peau et de la rendre plus souple.

05. Caractéristiques de l'appareil

Description du produit

Contenu de la boîte: 1 Wave Précision, 1 câble USB, 1 pochette de rangement, 1 manuel d'utilisation

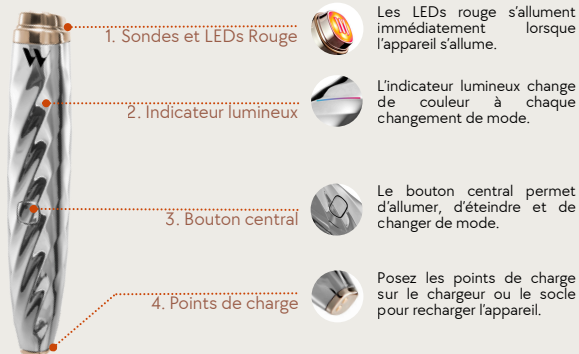

Bouton central

Allumer / Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton central pour allumer ou éteindre l'appareil.

Changer de mode

Appuyez brièvement sur le bouton central pour changer de mode.

Instructions de charge

Assurez vous que le chargeur, les points de charge ou le socle soient sec avant de recharger l'appareil. Évitez le contact à l'humidité.

Posez les points de charge de l'appareil sur le chargeur ou le socle de charge, puis branchez le câble sur un adaptateur ou un ordinateur.

Chargement en cours
Clignotement



Chargement terminé
Allumé



10



Ne laissez pas l'appareil branché en mode charge pendant plus de 24 heures.

06. Informations importantes

Consignes de sécurité

- Utilisez l'instrument uniquement avec le câble de charge fourni lors de la charge.
- N'utilisez pas l'instrument si des accessoires ou le câble de charge sont endommagés pour éviter les blessures.
- Si le câble de charge est endommagé, remplacez-le par un câble de charge d'origine pour éviter tout danger.
- Chargez complètement l'instrument au moins tous les 2 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Cet instrument n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 12 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont sous tutelle d'une personne responsable.
- Il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas l'instrument s'il est visiblement endommagé. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer, car cela pourrait causer des dommages graves aux yeux ou à la peau, pouvant entraîner une électrocution grave.
- N'utilisez pas l'instrument à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- Il est recommandé de charger, utiliser et stocker l'instrument à des températures comprises entre 5°C et 35°C.
- N'utilisez pas l'instrument si vous prenez des stéroïdes.
- Si votre peau est en train de se rétablir d'une procédure cosmétique (par exemple, exfoliation chimique ou mécanique, re-surfage au laser, traitements au laser fractionné, mésothérapie ou tout autre traitement de comblement et de sculpture au cours des deux dernières semaines), n'utilisez pas l'instrument.

Contre-indications et autres avertissements

Contre-indications:

- Consultez un dermatologue avant utilisation si vous avez des préoccupations médicales.
- N'utilisez pas l'instrument si vous êtes sensible à la lumière.
- N'utilisez pas l'instrument sur une peau gercée, sur des plaies ouvertes, lorsque vous êtes atteint d'une pathologie cutanée, une acné sévère, des coups de soleil ou une infection cutanée.
- N'utilisez pas sur la paupière supérieure, le globe oculaire, la paupière ou les zones muqueuses.
- N'utilisez pas l'instrument sur les grains de beauté, les verrues, les poils incarnés ou la peau irritée.
- Ne l'utilisez pas plus de 3 fois par jour sur la même zone. Une utilisation excessive peut causer des brûlures ou des dommages à la peau. Laissez au moins 4 heures entre les traitements.
- Ne partagez pas votre instrument avec d'autres personnes pour éviter tout risques de contamination et les infections nocives.

Autres avertissements:

- Gardez le câble de charge au sec. Ne plongez pas l'instrument dans l'eau.
- Ne chargez pas l'instrument dans des environnements humides tels qu'une baignoire remplie, une douche en cours d'utilisation ou près d'une piscine.
- Eviter de mettre l'instrument près d'une source de chaleur.
- Un nettoyage régulier de l'instrument garantit de meilleures performances et prolonge sa durée de vie.

Ingrédients à éviter

Certains ingrédients peuvent endommager la sonde, veuillez vous assurer que le produit cosmétique que vous utilisez avec les machines Wave ne contiennent pas les ingrédients suivants.

Propylène glycol, Méthylparaben, Lysine, Arginine, Valine, Leucine, Ammoniac, Acide capryloyl salicylique, Glycéryl dicaprylate, Glycine, Sérine, Acide aspartique.

Entretien et nettoyage de l'appareil

Une maintenance adéquate est cruciale pour assurer le bon fonctionnement de votre instrument. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une sous-performance ou un arrêt complet de l'appareil.

Toujours éteindre l'appareil avant le nettoyage

Appuyez longuement sur le bouton central pour éteindre l'appareil.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation

Pour s'assurer d'une performance optimale, veuillez nettoyer soigneusement l'appareil et la sonde après chaque utilisation. Vous pouvez enlever les résidus de produits cosmétique avec un chiffon légèrement humide.

Repasser avec un chiffon sec

Veuillez vous assurer que toutes les parties de l'appareil soient sèches avant de recharger ou de ranger l'appareil.



Ne rincez jamais l'appareil, le chargeur ou le socle de charge sous le robinet et ne les plongez pas dans l'eau.



Spécifications techniques

- Matériaux : ABS + Alliage de Zinc
- Taille - Appareil : 155 x 28 x 26 mm
- Poids - Appareil : 94 g
- Batterie : Li-ion 450 mAh 3.7 V
- Temps de charge : 2 heures
- Temps d'utilisation : Jusqu'à 40 minutes
- Autonomie en veille : 60 jours
- Interface : 1 bouton

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Wave Selfcare prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

La garantie couvre les pièces fonctionnelles affectant les performances de l'appareil. Elle ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, usure de la sonde, rayures...) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil.

Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Wave Selfcare et si des pièces de rechange ne provenant pas de Wave Selfcare ont été utilisées.

Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie

Si vous avez acheté l'appareil sur www.wave-selfcare.com:

Vous devez soumettre une preuve d'achat (numéro de commande et preuve de paiement) dans la rubrique SAV de notre site internet www.wave-selfcare.com. Par conséquent, veuillez conserver votre reçu d'achat d'origine pendant toute la durée de la garantie.

Si vous avez acheté l'appareil chez un revendeur (site internet ou boutique):

Vous devez faire votre réclamation auprès du vendeur professionnel qui vous a vendu l'appareil.

Environnement

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie. Apportez-le plutôt à un point de collecte officiel pour le recyclage. Cela aide à préserver l'environnement.



